S-Y 雙劃格細胞計算盤 (10 格) S-Y Double Grides Counting (Slide 10)



衛署許可號: 000268


中華民國專利號: 224808

美國專利證書號: 6,974,692

大陸專利號: ZL2008 2 0005436.X

包裝規格

- 100 片/盒 (1000 次)
- 20 盒/箱

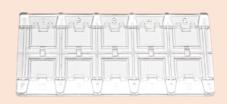


產品說明

- 1. 瞬間擴充, 節省時間。
- 2. 水平度夠,水平對焦。
- 3. 透析度夠,影像清晰。
- 4. 劃格創新, 快速掃瞄。
- 5. 二種劃格,多重功能。
- 6. 具 Double Check 功能。
- 7. 可直接發μ1報告。

- 雙劃格之技術規格簡介 -

- 1. 每片有10格計算盤, 左邊為九宮格區, 右邊為壓縮面板劃格區。
- 2. 每片計算盤均有二種刻度,左為九宮格區(81 小方格),右為壓縮面板劃格區(24 小長方格)。
- 3. 九宮格區為長×寬=3×3mm×深度 $0.1\mu1$,體積為 $0.9\mu1$ 。九宮格內每一宮格長與寬 各為 1mm, $1×1mm×深度 <math>0.1\mu1$,體積為 $0.1\mu1$ 。每一宮格有九小格,每一小格體積 為 $0.33×0.33×0.1(mm^3)=0.01\mu1$ 。
- 4. 計算盤右邊有 4 個壓縮面板,每一壓縮面板 劃分為六小格,每個壓縮面板的長×寬各為 lmm,厚度 0.05mm,面板上方承載之體積 為 1×1×0.05(mm³) = 0.05 μl。在壓縮面板上 1/6 格之體積為 0.0083 μl,長×寬 = 1/2×1/3×0.05(mm³) = 0.0083 μl。
- 5. 採雙對流孔設計, 尿沉渣瞬間擴充。

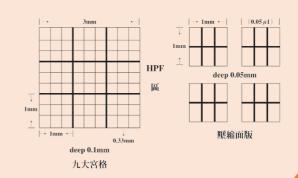



實用醫療器材有限公司 (IVD GMP 工廠) 廠址: 台北市內湖區行愛路 7 8 巷 2 4 號 1 樓 http://www.symic.com.tw 電話: (02) 2793-8549 傳真: (02) 2793-8577